

保証書

ご購入商品名	ライフフィット Vトレアプローチ Fit020
無料保証期間	お買い上げ日より6か月

本書は上記「無料修理保証期間」中に発生した場合、下記により無料修理をお約束するものです。

◆保証条件◆

1. 製品お買い上げ時において、既に破損・不良箇所等が認められた場合。
2. 取扱説明書に基づく取扱で、自然破損・故障を生じた場合（但し、誤用・当社指定以外の取扱での破損、故意や衝撃による破損、地震・火災等の天変地異による破損等の場合は適用しません。）
3. 一般家庭用としてご使用の場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

- 以上の条件を満たさない場合は、有料での修理はお受けいたしますが、無料での修理はお受け致しかねます。

販売店欄

店名	(印)
住所	TEL
お買い上げ年月日	

※本書に記載できない場合は、お買い上げがわかる書類やレシートなどを貼付して保管してください。

販売元

株式会社ライフフィット

本社 〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目42番4号サンピア大森 303
事務所 〒143-0023 東京都大田区山王2丁目12番6号

お客様相談室のご案内

商品のお取り扱い方法、
修理などのご相談は

株式会社ライフフィット
03-6450-0082

平日10時～16時受付(土・日・祝祭日、当社の休日を除く)

※商品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社ライフフィット(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(「個人情報」)を下記のとおり取扱います。

・当社はお客様の個人情報を当社商品のご相談への対応や修理及びその確認に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容を記録に残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使の為に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

・当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

・お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談窓口にご連絡ください。

作成2023年9月

取扱説明書

要保存

保証書付

ライフフィット Vトレアプローチ



目次

- 安全に使用していただくために…… P1
- 各部の名称…… P2
- ご使用前に…… P3
- 使用上のご注意…… P3
- 使用方法…… P4
- おすすめの使用法…… P5
- お手入れについて…… P5
- 保管について…… P6
- 故障かなと思ったら…… P6
- 電池のリサイクルについて…… P6
- 仕様…… P6
- 保証書……裏表紙

* ご使用前に、付属品を確認してください。

- 取扱説明書(本書) …… 1冊
- ACアダプター…… 1個
- USBコード…… 1本

LIFE FIT

安全に使用していただくために必ずお守りください

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
※お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 警告 ご使用前の警告

1. 本製品は日本国内でのみお使いください。
本製品の使用は健康な方を対象としています。
2. 次に該当する方は絶対に使用しないでください。
 - ・人口心肺などの生命維持用医療電子機器、心電計などの装着型医療電子機器、ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方
 - ・心臓に障害のある方
 - ・急性疾患のある方
 - ・妊娠している、または妊娠の疑いのある方
 - ・医師が不適当と認めた方
 - ・医師の治療を受けている方、特に身体の異常を感じている方
 - ・知覚障害のある方
 - ・血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
 - ・骨粗しょう症など骨に異常のある方
 - ・悪性の腫瘍のある方
 - ・リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方
 - ・過去の事故や疫病等により背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
 - ・腰痛（椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症等）のある方
 - ・重度の血行障害や血栓症などのある方上記以外に身体に異常を感じているとき。

※自己判断が難しい方は、必ず医師にご相談の上、ご使用ください。

3. 使用中に気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
4. 小学生以下、及びご自身で操作できない方、または他者から見てそう感じられる方は成人の方の介添えの上ご使用ください。また、乳幼児やベットのいる場所での使用はお止めください。
5. 本体の上に立ったり、必要以上に体重をかけたりしないでください。
ご使用中に製品が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
6. 1回の使用時間は10分を超えないようにしてください。続けて使用する場合は最低1時間身体を休ませてからご使用ください。また、1日あたりの使用は通算して30分以内としてく

- ださい。体調不良を起こす原因になります。
7. 頭部への使用はお止めください。
8. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管してください。紛失した場合は再発行をお受けし兼ねる場合がございます。
9. 本製品は一人用です。同時に二人以上でご使用にならないでください。
10. 使用目的以外での使用はお止めください。
11. 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
12. 本製品に貼付している定格ラベルがはがれた場合は、すみやかに使用を中止してください。
13. 本製品の動作に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止してください。
14. 本製品をご自分で改造したり、分解しないでください。
15. 充電後、またはご使用後は必ずアダプターをコンセントから抜いてください。
16. 本製品は必ず屋内でご使用ください。

⚠ 注意 お手入れについての注意事項

1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れを拭き取ってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。

⚠ 注意 保管についての注意事項

1. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様や勝手に触ることのないよう必要に応じて梱包などを施してください。
2. ホコリや湿気のある場所、また直射日光が当たる場所や高温・多湿なところは避け、乾燥した場所に保管してください。

保管について

使用後は汚れやホコリをとり、湿気の少ないところに保管してください。
USBコードは、ねじれをほどこいて保管してください。

故障かなと思ったら

本製品に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、ACアダプターを抜いてお買い上げ販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。

症状

調べるところ

▶動かさない

- ◎ バッテリー残量が残っているか確認してください。
- ◎ 電源をONにしているか確認してください。
- ◎ EMSは通電し動作するので素肌で行ってください。

▶使用中に止まった

- ◎ タイマーが働き、10分経過すると自動的に停止します。
- ◎ バッテリー残量が残っているか確認してください。

上記点検後、なお異常音、動作しないなどの異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。

電池のリサイクルについて

この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本品を廃棄する時は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

仕 様

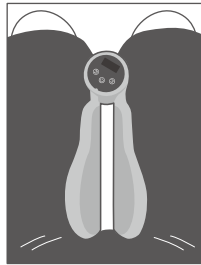
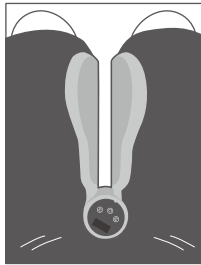
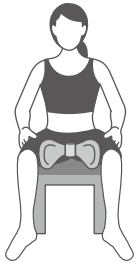
販 売 名	： ライフフィット Vトリアプローチ
型 番	： Fit020
定 格	： AC100V 50/60Hz 5W
定 格 時 間	： 20分
本 体 入 力	： DC5V
ACアダプター	： THX-050100KDJ
オートタイマー	： 10分
本 体 寸 法	： 幅約30cm×長さ約25cm×高さ約13cm
本 体 質 量	： 約600g
USBコード長さ	： 約50cm
材 質	： ABS樹脂、TPR樹脂
製 造 国	： 中国

※改良のため一部仕様を変更する場合があります。




おすすめの使用方法

本製品は独自のV形状にバネ伸縮機能、振動機能、EMS機能を搭載した商品です。
基本的に挟んで保持するだけで十分に効果があります。
(筋肉を伸縮させずに一定の姿勢をキープして負荷をかけます。)


内太もも (座り姿勢)



内太もも (立つ姿勢)

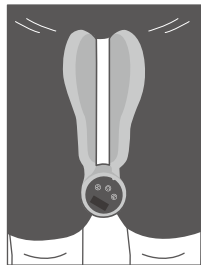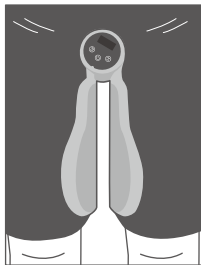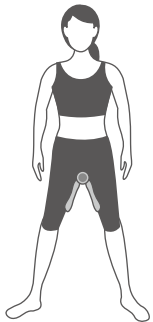

腕・バスト

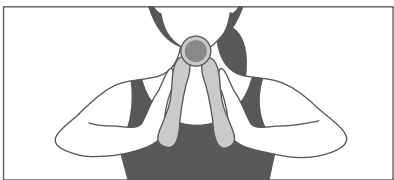

※本体のあて方の向きや持ち方を変えることにより様々な部分を刺激できます。

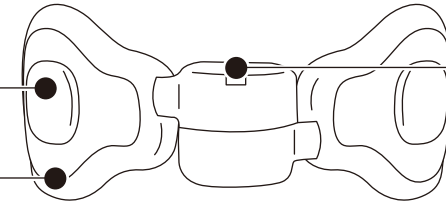
お手入れについて

乾いた布で汚れを拭き取ってください。
汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯などは使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

各部の名称

本 体


EMS 導電部
(左右に1箇所ずつ)
振動板
(左右に1箇所ずつ)



充電用 USB C-Type
コネクター受け部

本体操作パネル

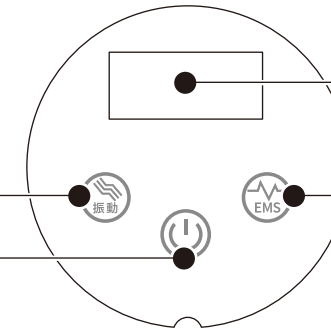
振動ボタン
電源ボタン



表示部


EMS ボタン

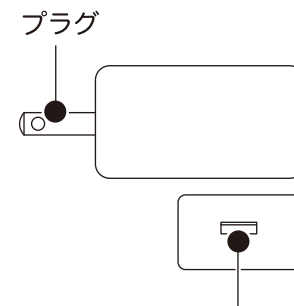AC アダプター



USB コネクター受け部

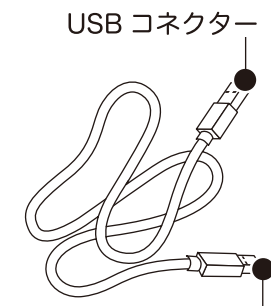USB コード


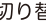


USB C-Type コネクター

ご使用の前に

充電のしかた

はじめてご使用になる時、また長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し動かないことがありますので、ご使用の前に必ず充電してからお使いください。

1. USBコードのコネクターをACアダプターに差し込んでください。
2. ACアダプターのプラグをコンセントに差し込み、USBコードのC-T y p e コネクターを本体の充電用USB C-T y p e コネクター受け部に差し込んでください。
※充電中は本体操作パネル「表示部」 が点滅します。
3. 充電は約2時間行ってください。(バッテリー残量が少ない時の満充電までの時間です。)
※充電が終了すると本体操作パネル「表示部」 が点灯に切り替わります。
4. 充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから抜き、USBコードのC-T y p e コネクターを本体の充電用USB C-T y p e コネクター受け部からはずしてください。

- 1回の充電で約1時間使用できます。
(1時間使用できる振動の強度は「5」、EMSの強度は「10」になります。)
- 電源をONにするとバッテリー残量が表示されます。
(MAX時(満充電時)を「99」で表示し「90」→「85」→「80」…の順に残量を表示します。)
※電源をONにすると残量を検知するため、瞬間的に表示が上下に変化しますが約10秒後に表示が安定し、正確な残量を表示します。

オートタイマーについて







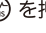
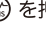
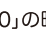

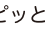
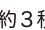
使い過ぎや切り忘れを防止するため、振動またはEMS動作開始から約10分で自動的に止まります。本体操作パネル「表示部」に「9.99」～「0.00」と表示され「0.00」になると動作が止まります。

⚠ 注意 使用上のご注意

充電時にACアダプターが確実に接続されているかを確認してください。電源及びほかの操作ボタンが正しく動作するかを確認してください。本製品に貼付している定格ラベルがはがれた場合や動作に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止しACアダプターを抜き修理を依頼してください。

- ・火災、感電の原因になります。

使用方法

- ① 電源ボタン  を約3秒長押しするとピッと鳴り、本体操作パネル「表示部」にバッテリー残量「99」が表示されます。
※「99」は満充電の状態です。バッテリー残量表示は「99」→「95」→「90」→「85」…の順に残量を表示します。
- ② 1) 振動を起動・終了する
振動ボタン  を押すとピッと鳴り、本体操作パネル「表示部」に振動レベル「1」が表示され振動動作を開始します。振動レベルは、振動ボタン  を押すごとに1レベルずつ強くなり「1」～「5」までの5段階あります。
最大レベル「5」の時に振動ボタン  を押すと動作が止まります。
2) EMSを起動・終了する
※EMSは通電し動作するので、素肌で行ってください。
※EMSボタン  を押すとEMS電導部に電気が流れEMSボタン  を押すごとにレベルが強くなります。
レベル1以上の強い状態から使用せずに安全にご使用いただくためにレベル1から1レベルずつ確認しながら徐々にレベルを上げてください。
EMSボタン  を押すとピッと鳴り、本体操作パネル「表示部」にEMSレベル「1」が表示されEMS動作を開始します。EMSレベルは、EMSボタン  を押すごとに1レベルずつ強くなり「H01」～「H10」までの10段階あります。
最大レベル「H10」の時にEMSボタン  を押すと動作が止まります。
※振動とEMSを同時に起動させることはできません。
※振動からEMS、EMSから振動に切り替えた場合、起動から10分経過すると動作が止まります。
- ③ 振動またはEMS動作中に電源ボタン  を押すと動作が止まります。
- ④ 電源ボタン  を約3秒長押しするとピッと鳴り、電源OFFになります。
- ⑤ 電源を入れた後、どのボタンにも触れずに約1分間経過すると自動で電源OFFになります。再度、作動させるには電源ボタン  を約3秒長押ししてください。