

あなたと、あなたの家族のために…

LIFE FIT

www.lifefit.co.jp

ライフフィット マッサージャー 3way

思わずニコニコの心地よさ



メーカー希望小売価格

49,800円

(税別・送料別)

販売名	ライフフィット マッサージャー 3way
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器製造販売認証番号	301AGBZX00054000

座イスとして、イスに立て掛けて、寝ても使用できる 〈医療機器製造販売認証のマッサージ器〉

ライフフィット マッサージャー 3way

1way

座イスで使用



2way

イスに立て掛けて使用



3way

寝て使用



これ一台で、使い方いろいろ!

LIFE FIT 3way

使用目的または効果

- あんまマッサージの代用 -
一般家庭で使用する


疲労の回復 ・ 血行の促進 ・ 筋肉の疲れをとる
筋肉のこりをほぐす ・ 神経痛、筋肉痛をやわらげる

1way

座イスで使用

腰 (もみ玉)

腰をしっかり揉みほぐし疲労を改善します。

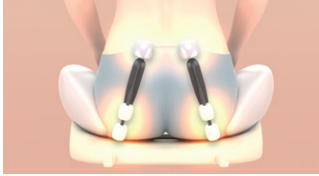

お尻 (エアークッション)

お尻を両サイドからしっかりと加圧マッサージします。



2way

イスに立て掛けて使用

背中 (もみ玉)

背中を効果的に刺激し筋肉の、疲れをとります。



腰 (エアークッション)

腰や骨盤周りを加圧し、刺激します。
※マッサージ器を天地逆にして使用も可能です。



3way

寝て使用

首肩 (もみ玉)

首肩のこりや張りをしっかりと揉みほぐします。



腰 (エアークッション)

腰をしっかり押し上げストレッチします。



操作方法

停止ボタン

全動作を停止します。
再度スタートさせるときはお好みのボタンを押してください。

自動エア

あらかじめ設定された3種類の自動エアークースからお選びできます。
(座/腰 → 骨盤/肩 → 全部位 → OFF)の順で動作します。

エアークッション

自動エアークース動作中、ボタンのランプが点灯しますのでエアークッションの強さをお選びください。
(弱 → 強)の順で動作します。



もみ自動

[自動 I] もみ速度が穏やかに変化します。
[自動 II] もみ速度が大きく変化します。
(自動 I → 自動 II → OFF)の順で動作します。
自動エアークースも追加できます。

もみ手動

2種類の速さからもみ動作をお選びいただけます。
(速 → 遅 → OFF)の順で動作します。
自動エアークースも追加できます。

製品仕様

一般的な名称：家庭用電気マッサージ器
販売名：ライフフィット マッサージャー 3way
型番：Life105
医療機器製造販売認証番号：301AGBZX00054000
定格電圧・周波数：AC100V・50/60Hz

消費電力：40W
もみ回数：(速)約25回/分・(遅)約18回/分
オートオフタイマー：15分
本体重量：約5.3kg

寸法 (寝かせた状態)：幅 約55cm×奥行 約76.5cm×高さ 約18cm
寸法 (起こした状態)：幅 約55cm×奥行 約41cm×高さ 約40cm
材質：合成皮革、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部)、
ポリエステル(メッシュ部)
製造販売元：株式会社ライフフィット


安全に関する
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。
ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人・悪性腫瘍のある人・心臓に障害のある人・妊娠中や出産直後の人・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人・皮膚に創傷のある人・安静を必要とする人・体温38℃以上の有熱期にある人・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人・背骨に異常のある人、曲がっている人・けんしょう炎の人・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人・本製品や使用しても効果がみられない人・その他医療機関で治療中の人、事故や体調不良をおこす原因になります。
- 使用前に必ず張地が破れていないかを確認する
どんなに小さな破れでもただちに使用を中止しACアダプターを抜き、修理を依頼してください。
けがや感電の原因になります。
- 次の人は使用しない
医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リウマチ(瘤)、急性静脈リウマチ(瘤)、各種皮膚炎及び皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)症状を悪化させる原因となります。
- 子供には使用させない。
事故やけが、故障の恐れがあります。
- 次のような時は使用しない
疲労が激しいとき、酒に酔っているとき、湿疹が生じているときは体調不良をおこす恐れがあります。
- 本製品に万一故障などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、お買い求めの販売店または製造販売元までご連絡ください。

LIFE FIT

株式会社ライフフィット

東京都品川区南大井6-17-17 FINEビル3階

TEL.03-6450-0082

<http://lifefit.co.jp/index.shtml>