

## 保証書

ご購入商品名	ライフフィット マッサージャー 3way
無料修理保証期間	お買い上げ日より1年間

本書は上記「無料修理保証期間」中に発生した場合、下記により無料修理をお約束するものです。

### ◆保証条件◆

1. 製品お買い上げ時において、既に破損・不良箇所等が認められた場合。
2. 取扱説明書に基づく取り扱いで、自然破損・故障を生じた場合（但し、誤用・当社指定以外の取り扱いでの破損、故意や衝撃による破損、地震・火災等の天変地異による破損等の場合は適用しません。）
3. 一般家庭用としてご使用の場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

- 以上の条件を満たさない場合は、有料での修理はお受けいたしますが、無料での修理はお受け致しかねます。

#### 販売店欄

店名	(印)
住所	TEL
お買い上げ年月日	

※本書に記載できない場合は、お買い上げがわかる書類やレシートなどを貼付して保管してください。

#### 製造販売元 株式会社ライフフィット

本社 〒145-0074 東京都大田区東嶺町6番3号  
事務所 〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-17 FINEビル3階

## ご相談窓口のご案内

お問い合わせはこちらまで

# 03-6450-0082

## 株式会社ライフフィット

平日9時～17時受付（土・日・祝祭日、当社の休日を除く）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社ライフフィット(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(「個人情報」)を下記のとおり取り扱います。

・当社はおお客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容に記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使の為に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

・当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

・お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談窓口にご連絡ください。


作成2019年8月

## 取扱説明書

要保存

保証書付

# ライフフィット マッサージャー 3way

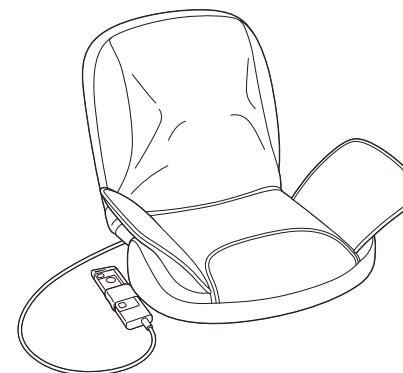

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

### 使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。

- 疲労の回復
  - 血行の促進
  - 筋肉の疲れをとる
  - 筋肉のこりをほぐす
  - 神経痛、筋肉痛をやわらげる
- 一般家庭で使用すること。



### もくじ

- 安全上のご注意……………1～4
- 各部の名称……………5・6
- ご使用前に……………7
- ご使用方法……………8～11
- 使用上のご注意……………11
- お手入れについて……………11
- 保管について……………12
- 故障かなと思ったら……………12
- 愛情点検について……………13
- 仕様……………13
- アフターサービスについて……………14
- メモ……………15～17
- 無料修理規定……………18
- 保証書……………裏表紙



# LIFE FIT

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 <b>注意</b>	人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

## 絵表示の例

	○記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

 強制	医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。 <ul style="list-style-type: none"><li>●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人</li><li>●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人</li><li>●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人</li><li>●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人</li><li>●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)</li><li>●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人</li><li>●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人</li><li>●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人</li><li>●本製品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の入事故や体調不良をおこす原因になります。</li></ul>
---	--

## 〈無料修理規定〉

1. 無料修理保証期間に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、裏表紙のご相談窓口が無料修理いたします。
2. 無料修理保証期間に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、裏表紙のご相談窓口に依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、裏表紙のご相談窓口にご相談ください。
5. 無料修理保証期間でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無料修理保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、裏表紙のご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 無料修理保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP14をご覧ください。



強制

使用前に必ず張地が破れていないか確認する。  
どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。  
けがや感電の原因になります。

ACアダプターは交流100Vで使用する。  
火災や感電の原因になります。

次の人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人。  
(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)  
症状を悪化させる原因になります。

ACアダプタープラグやソケットを定期的に掃除する。  
ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。

体重が90kg以上の人は使用しない。  
事故やけが、故障の原因になります。



禁止

マッサージ以外の目的には使用しない。また、ひじ、ひざ、頭部、胸部、腹部へは使用しない。  
事故やけがの原因になります。

強く押しつけて使用しない。  
皮膚や筋肉を痛める原因になります。

子供には使用させない。  
(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。)  
事故やけがの原因になります。

子供には本体の上に乗せたり遊ばせたりしない。  
事故やけがの原因になります。

キャスター付きの椅子に座って使用しない。  
転倒による事故やけがの原因になります。

本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。  
感電やショート、火災の原因になります。

ACアダプターやACアダプタープラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。ACアダプターやACアダプタープラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはご相談窓口にて修理を依頼する。  
そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

付属以外のACアダプターで使用しない。  
また、付属のACアダプターで他の電気製品を使用しない。  
感電やショート、発火の原因になります。



電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ACアダプターに巻きつけたりしない。  
また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。  
感電や火災の原因になります。






## 各部の名称

### 本体

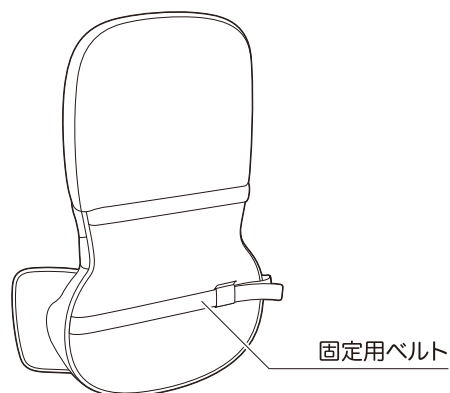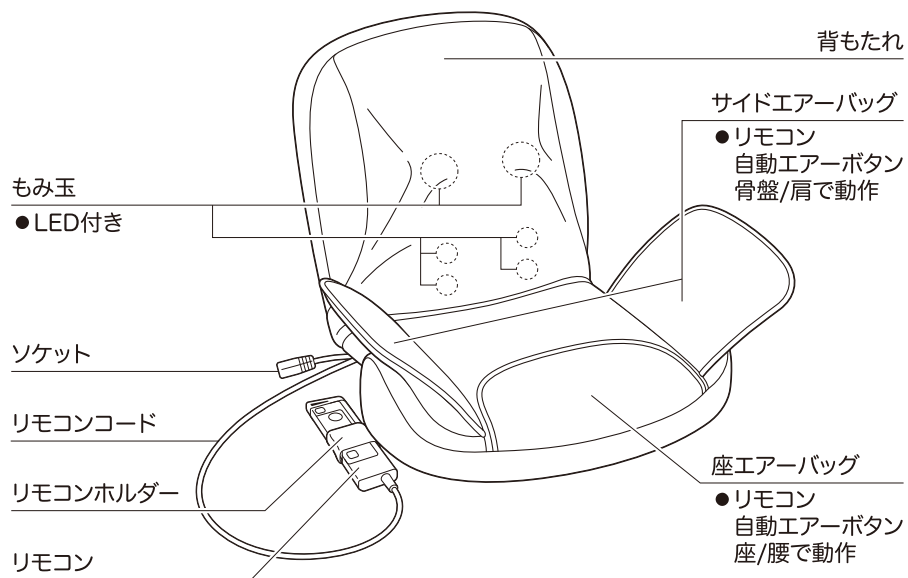

### 付属品

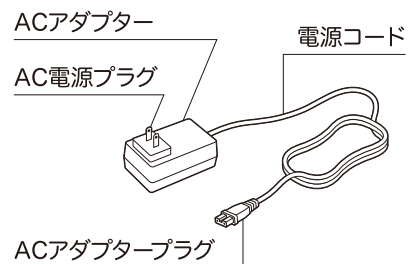

- 付属品は同梱されているものをお使いください。

## アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)  
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 無料修理保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 無料修理保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
当社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。  
(ただし、縫製部品は除きます。)  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または  
ご相談窓口にお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときそのまま放置しないで  
各自治体の取り決めにしたがってください。

## 愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



愛情点検

このような症状はありませんか。

- こげくさいにおいがする
- コード、ACアダプターが異常に熱い
- コードを動かすと通電したりしなかったりする
- その他異常がある




故障や事故防止のため使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはご相談窓口に点検、修理をご相談ください。

## 仕様

販売名	ライフフィット マッサージャー 3way
型番	Life105
医療機器認証番号	301AGBZX00054000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 40W
ACアダプター	IVP2400-2000
エア圧力	40kPa以下
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
もみ回数	速 約25回/分 遅 約18回/分
外形寸法	寝かせた状態:幅 約55cm×奥行 約76.5cm×高さ 約18cm 起こした状態:幅 約55cm×奥行 約41cm×高さ 約40cm
質量(ACアダプター除く)	約5.3kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	合成皮革、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部)、 ポリエステル(メッシュ部)
付属品	ACアダプター
製造販売元	株式会社ライフフィット 〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-17 FINEビル3階
医療機器製造販売業許可番号	13B2X10392
外国製造業者	蘇州大科健身器材有限公司

## リモコン

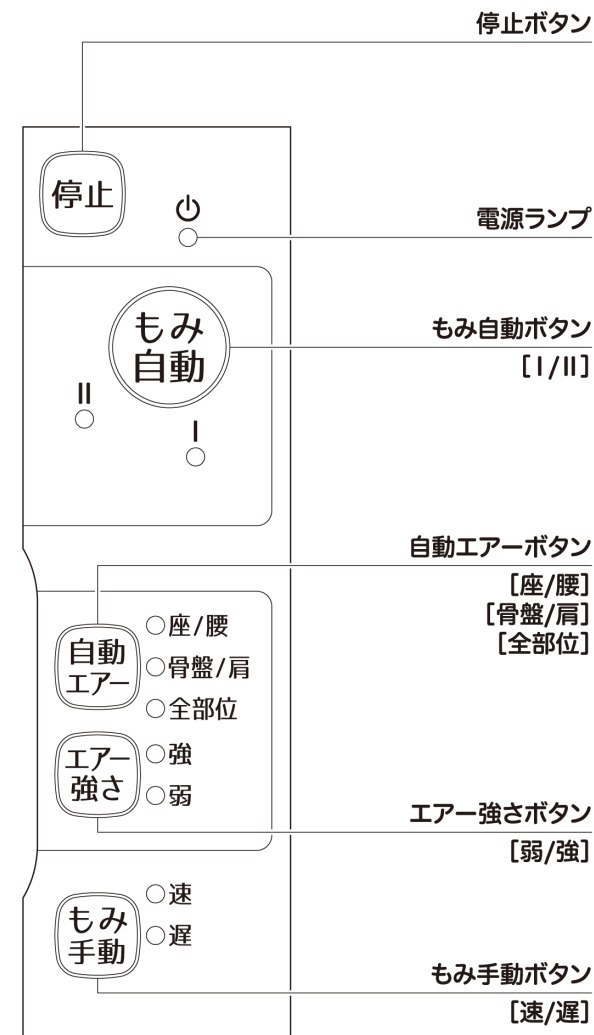

## ご使用の前に

### 設置のしかた

- ・本製品をシートにした状態で椅子にたてかけて使用する場合は、固定用ベルトを右図のように椅子の背もたれに固定してください。本製品が倒れて事故やけがの原因になります。
- ・椅子にたてかけて使用する場合は、椅子の背もたれを壁で支えて設置してください。椅子と一緒に後ろに倒れる原因になります。
- ・キャスター付きの椅子や回転椅子で使用しないでください。転倒による事故やけがの原因になります。
- ・ソファ等背もたれに固定用ベルトが使用できない場合は、たてかけてお使いください。
- ・床で使用する場合、使用中の動作音をやわらげるとともに床を傷つけないためにマットを敷くことをおすすめします。



- 使用前に必ず張地が破れていないか確認し、破れがあるときはただちに使用を中止してください。
- 張地を外した状態や破れた状態で使用しないでください。破れた場合は使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。事故やけが、故障の原因になります。
- ひじ、ひざ、頭部、胸部、腹部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- ACアダプターが確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

## 保管について


- ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 汚れやホコリを取り、湿気が少なく直射日光があたらない場所に保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードはねじれをほどこいて保管してください。

## 故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、お買い上げ販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● もみ玉と布がすれる音</li> <li>● 張地とその他がすれる音</li> <li>● マッサージ動作時のモーター音</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 構造上のもので機能などに影響はありません</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● もみ玉が止まる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無理な力がかかっていませんか 下記「安全装置について」を参照</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動作しない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプタープラグやACアダプターが抜けていませんか</li> <li>● オートタイマーが働き停止状態になっていませんか</li> </ul>

症 状	直し方
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動作せずリモコンのランプが点滅する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプタープラグやACアダプターを差し直してください(外来雑音による、誤動作が考えられます)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 連続使用後にマッサージが止まる(リモコンランプは点灯している)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モーターの温度上昇のため、安全装置が働いていますしばらく時間をあけて(1時間程度)から再度動作を確認してください</li> </ul>

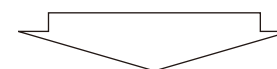

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。

### 安全装置について

もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き動作が止まることがあります。そのときは一度ACアダプターをコンセントから抜き、しばらく時間をあけてから再度ACアダプターをコンセントに差し込んでください。



## ご使用方法

### オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

## 使用上のご注意

合成皮革が変色や変質するおそれがあります。  
永くお使いいただくために次の使用にご注意ください。

- 風呂あがりなど、体が汗ばんだ状態で使用しないでください。
- 整髪料や化粧品などを接触させないでください。
- ビニール製品や壁紙に長時間接触させないでください。

## お手入れについて

### 本体

- 柔らかい乾いた布でふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき、仕上げに乾いた布で水分をふき取ってください。

### 布部分

- ぬるま湯でうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき取ってください。
- 仕上げに水を含ませ、よくしぼった布でふき取ってください。

### リモコン

- 柔らかい乾いた布でふき取ってください。

次のお手入れのしかたは合成皮革が変色や変質するおそれがあります。

- シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯を使用する。
- ドライヤーで急激に乾燥させる。
- アイロンがけをする。

## ご使用方法

- ・ ACアダプタープラグをソケットに差ししてください。  
(抜け落ちないように確実に接続する)
- ・ ACアダプターをコンセントに差ししてください。  
電源ランプが点灯します。  
(抜け落ちないように確実に接続する)

### 自動モード

1.  ボタンを押すと[もみ自動モード]を開始します。

[もみ自動モード]は上の2つのもみ玉と下の4つのもみ玉が速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージします。ボタンを押すごとに[自動I][自動II][停止]の順番に切り替わります。

[自動I]は、もみ速度が穏やかに変化して筋肉のこりをほぐすリラックスコース

[自動II]は、もみ速度が大きく変化して筋肉の疲れをとるリフレッシュコース


- 刺激が強過ぎるときはタオルをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。

[もみ自動モード]動作中に  ボタンを押して

[自動エアコース]を追加できます。

あらかじめ設定された3種類の[自動エアコース]からお選びいただけます。

ボタンを押すごとに[座/腰][骨盤/肩][全部位][停止]の順番に切り替わります。

[自動エアコース]動作中、 ボタンのランプが点灯しますのでエアバッグの強さをお選びください。

ボタンを押すごとに[弱][強]の順番に切り替わります。



# ご使用方法

**【座/腰】**は座エアバッグが動作してマッサージを行います。

- ・ 座椅子状態
- ・ シート状態①

⇒おしり

他の状態でのご使用は推奨できません。

**【骨盤/肩】**はサイドエアバッグが動作してマッサージを行います。

- ・ 座椅子状態 ⇒ 骨盤
- ・ シート状態② ⇒ 骨盤
- ・ シート状態③ ⇒ 肩

他の状態でのご使用は推奨できません。

**【全部位】**は座エアバッグとサイドエアバッグが交互または同時に動作してマッサージを行います。

- ・ 座椅子状態、シート状態① ⇒ おしり、骨盤
- ・ シート状態② ⇒ 腰、おしり
- ・ シート状態③ ⇒ 肩、背中

他の状態でのご使用は推奨できません。

本製品は下記の様なスタイルで使用することが可能です。



座椅子状態



シート状態①  
(床に寝かせて寝て使用)




シート状態②  
(椅子にたてかけて使用)



シート状態③  
(椅子にたてかけて使用)

## リクライニング機構

- 本製品は背もたれが7段階に可動します。  
(①～⑦)  
座面を押さえながら背もたれを手前に引いてください。
- 元に戻す場合は、背もたれをさらに引くと  
(⑧)ロックがはずれて①に戻ります。

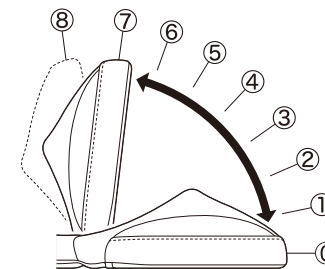

- もみ玉の上に座らないでください。事故やけが、故障の原因になります。
- シート状態③で、エアバッグが肩に当たらないときは、タオルやクッションなどで高さを調節してください。
- リクライニング機構を利用して当たる位置を調節することもできます。

2. マッサージをやめたいときに **停止** ボタンを押すと、マッサージ動作が止まります。

- ・ ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ ACアダプタープラグをソケットから抜いてください。

- 刺激が強過ぎるときはタオルをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。

## 手動および複合モード

・ 単独動作は **もみ手動** **自動エア**

複合動作は **もみ手動** + **自動エア**

どちらかの動作を停止させて単独動作に切り替えることができます。

- ・ **もみ手動** ボタンで、もみ動作の速さをお選びいただけます。  
ボタンを押すごとに[速][遅][停止]の順番に切り替わります。
- ・ **自動エア** ボタンで、あらかじめ設定された3種類の[自動エアコース]からお選びいただけます。(3種類のコースは9頁にてご確認ください)
- ・ **エア強さ** ボタンで、エアバッグの強さをお選びください。  
ボタンを押すごとに[弱][強]の順番に切り替わります。